


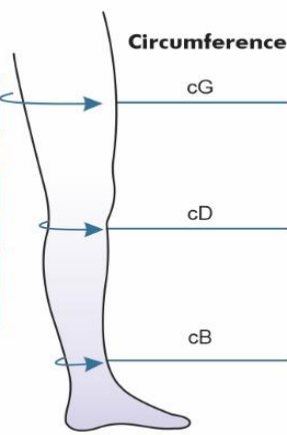
جهت تعیین سایز جوراب واریس :

جهت تعیین سایز جوراب های زیر زانو ، ابتدا دور مچ پا یک سانت بالاتر از قوزک (قسمت B در جدول) ، در مرحله دوم دور زیر زانو ۲ سانت زیر زانو (قسمت D در جدول) اندازه گیری می شود. همچنین برای کسانی که جوراب بالای ران تجویز می شود، علاوه بر دو نقطه ذکر شده: قسمت دور کشاله ران ، ۵ سانت زیر فاق (قسمت g در جدول) نیز می بایست اندازه گیری گردد. پس از اندازه گیری دقیق ، این اندازه ها داخل جدول قرار میگیرد و تعیین سایز مصرف کننده صورت می پذیرد.



R.A.F Right Asian Farmed

رايت آرين فارمد



سایز دور ران	size 1	size 2	size 3	size 4	size 5	size 6	size 7	size 8
G+	47-54	51-59	55-65	60-69	63-73	67-72		
G	41-46	43-50	45-54	51-59	54-62	58-66	62-70	65-72
D	26-31	28-35	31-38	33-41	36-44	37-47	40-49	42-51
B	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	30-33
ارتفاع جوراب								
		Short	Normal					
A-D	34-38	39-44						
A-G	61-70	71-82						

B مچ پا یک سانت بالاتر از قوزک

D دو سانت زیر زانو

G پنج سانت پایین تر از فاق پا

G+ جهت بیمارانی که قطر کشاله ران آنها بیشتر از سایز های معمولی است.

همچنین جهت تعیین ارتفاع پا : می بایست ارتفاع پاشنه تا ۲ سانت زیر زانو برای جوراب های زیر زانو (A-D) و ارتفاع پاشنه تا ۵ سانت زیر فاق برای جوراب های بالای ران (A-G) اندازه گیری گردد.

مثال: دور مچ پای فردی ۲۸ سانت و زیر زانو ۴۲ و ارتفاع پا ۳۸ سانت می باشد . سایز ایشان ۶ با طول short می باشد. مثال دیگر: اگر دور مچ پای فردی ۲۵ سانت و زیر زانویش ۴۰ و کشاله ران ۵۷ می باشد، همانطور که ملاحظه می فرمائید می توان به ایشان سایز ۴ و ۵ را پیشنهاد داد، در چنین مواردی بهتر است به دو نکته توجه نمود: سن بیمار (جهت توانایی پوشیدن جوراب) و همچنین تجربه قبلی مصرف کننده، که آیا قبلا از جوراب واریس استفاده نموده است یا خیر؟ اگر سن بیمار بالا باشد و یا قبلا از جوراب استفاده ننموده، بهتر است از سایز ۵ و در غیر اینصورت از می توان سایز ۴ را به ایشان پیشنهاد نمود.

- هنگام اندازه گیری ، بیمار بهتر است در حالت ایستاده باشد.
- پای بیمار بدون هیچ پوششی می بایست اندازه گیری گردد.
- G+ برای بیمارانی طراحی شده است که قطر کشاله ران آنها بیشتر از سایز های معمول می باشد.